



MULTIFUNCTIONAL CART



Cod. **ESF-816192/special**

Multifunction cart with : 5 Drawers in painted steel, 1 ABS extending table, 1 white, ABS, 10 liter waste bin, 1 red ABS catheter and probe Holder The self-bearing monocoque body is made in steel sheet coated with anti-mould epoxy powders.

The left compartment features four trays with metal rim. Drawers are made in steel, with anti-mould epoxy powder coating, and are equipped with : Central locking system, Silent sliding system on metal tracks and rollers, End stoppers.

1 drawer mm. 615 x 470 x 68 H, 4 drawers mm. 615 x 470 x 147 H .

The tabletop is made in technopolymers, and has no sharp edges for ease of use when cleaning and disinfecting.

Push handle in stainless steel, fully integrated in the frame
4 casters, of which 2 with brake, Ø 125mm (anti-static on demand), non-marking, anti-thread, mounted on swiveling bearings, 4 PVC non-marking bumpers.

ACCESSORIES:

DR001

Internal partition for drawer 4 pcs 37x3,9 51,7x3,9

DR002

Internal partition for drawer 4 pcs 37x11 and 4 pcs 51,7x11

DR010

I.V. POLE

DR011

MONITOR / DEFIBRILLATOR HOLDER



80 X 62 X 100 H (cm)




ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com





CHARIOT MULTIFONCTIONNEL

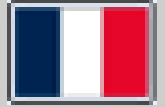

Cod. **ESF-816192/special**

Chariot multi-usage avec : 5 tiroirs en acier laqué, 1 plateau extractible en ABS, 1 poubelle en ABS de 10 litres blanche, 1 porte-cathéter et sondes en ABS rouge
Le cadre autoporteur est réalisé en tôle d'acier laqué à l'aide de poudres époxy anti-moisissure.

Dans le compartiment gauche sont logés quatre petits plans avec une protection avant métallique.

Les tiroirs en acier, laqués à l'aide de poudres époxy anti-moisissure, sont livrés avec : Système de fermeture avec clé centrale, Système de coulissement silencieux sur glissières métalliques et billes, Butée de fin de course 1 tiroir de 615 x 470 x 68 mm/ H, 4 tiroirs de 615 x 470 x 147 mm/ H Le plan de travail en technopolymères ne présente aucune arête pour faciliter le nettoyage et la désinfection. Poignée réalisée en acier inox parfaitement intégrée dans la structure.

Avec base 4 roues, dont 2 avec frein, de 125 mm \varnothing (antistatiques sur demande), anti-traces, ne s'effilochant pas, montées sur roulements pivotants, 4 pare-chocs en PVC anti-rayure.

ACCESSOIRES:

DR001

Partition interne pour tiroir 4 pcs 37x3,9 et 4 pcs 51,7x3,9

DR002

Partition interne pour tiroir 4 pcs 37x11 et 4 pcs 51,7x11

DR010

Tige porte sérum

DR011

Support pour moniteur/défibrillateur



80 X 62 X 100 H (cm)



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

