



ESB!%5





Lit médical - 4 sections



MOBILIER MEDICAL



Cod. ES6-%

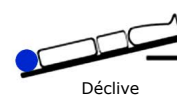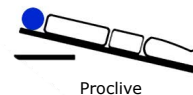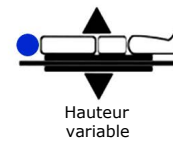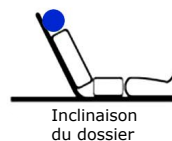

Bouton de contrôle pour plier les barrières latérales



Barrière latérales pliées



Manivelle ouverte



Tête du lit avec 4 manivelles

- Le dossier, la partie jambes, les positions de proclive/déclive et la hauteur sont réglables par l'aide de quatre manivelles
- La plateforme du lit est fabriquée en plaque d'acier perforée et traitée anti-corrosion
- Structure en acier peint epoxy traitée anti-rouille
- Les panneaux en ABS aux extrémités sont facilement démontables
- 4 roues pivotantes silencieuses dont deux avec freins
- Barrières latérales de sécurité en alliage d'aluminium facilement pliables
- 4 protections anti-choc sur les quatre coins du lit
- Potence porte-sérum télescopique sur le côté du lit

Caractéristiques techniques

- Position proclive/déclive : -12/+12°
- Inclinaison du dossier : 1-80°
- Inclinaison de la partie jambes : 1-40°
- Plage de l'hauteur variable : 250mm
- Roues de diamètre 125 mm
- Poids max. du patient : 200 Kg
- Dimensions du plan de couchage : 190 x 55 x 25 cm
- Dimensions totales du lit : 208 x 98 x 45~70 cm