



ES-KM1204 ADVANCE

Table d'opération électrique compatible
avec arceau à C, avec dessus coulissant



BLOC OPERATOIRE



ES-KM1204 ADVANCE

Table d'opération électrique compatible avec l'arceau à C, avec dessus coulissant



Équipé avec:

- Structure en inox 304, qualité médicale
- Table avec dessus coulissant
- Télécommande à fil
- Panneau de commande supplémentaire
- Fonction mémoire
- Position zéro
- Batterie rechargeable intégrée

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES :

- Boîtier de contrôle basé sur SMPS.
- Peut gérer de meilleures fluctuations de tension.
- Lorsqu'au repos, la consommation de courant est nulle et permet d'économiser de l'énergie, cela est conforme aux nouvelles normes européennes et américaines où la consommation d'énergie au repos doit être nulle et où les systèmes basés sur un transformateur sont obsolètes.
- Combiné et panneau de commande supplémentaire
- Indication de batterie de secours fournie dans le deuxième combiné.
- Le panneau de commande dispose de 2 fonctions de mémoire.
- Le deuxième combiné dispose également d'une clé de sécurité pour verrouiller l'ensemble du combiné.
- Le combiné est conçu avec un indicateur LED arrière pour une meilleure visibilité.
- C'est le seul combiné doté de fonctionnalités de rétroéclairage.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

- Colonne carrée latérale
- Raccord en acier inoxydable
- Section amovible pour la tête, les jambes et le bassin
- Dans un pont rénal intégré
- Radio à cinq sections – Dessus translucide
- Base et couvercle en acier inoxydable attrayant et facile à nettoyer
- Une mécanique sophistiquée assure une articulation douce et sans marche du plateau de table pour un positionnement précis du patient
- Batterie de secours avec circuit de recharge

POSITIONS DE LA TABLE :

- Réglage de la hauteur – haut et bas
- Inclinaison latérale – Gauche et Droite +/- 25°
- Trendelenburg et Anti-Trendelenburg +/- 30°
- Position Flex et Réflexe 70°/30°
- Dessus coulissant de 30 cm



Trendelenburg



Trendelenburg inversé



Position Flex



Position Réflexe



Inclinaison latérale
gauche/droite



Réglage de la hauteur
haut/bas



Position GYN



Position rénal

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur de la table	2050 mm
Largeur de la table	550 mm
Hauteur (sans matelas)	Min. 750 à max. 1000 mm
Trendelenburg	+/- 25°
Inclinaison latérale	+/- 20°
Section dos	+/- 70°
Section tête	+/- 60°
Section de jambe	0°-90°
Système de verrouillage au sol	Manuel
Glissement supérieur	5" en arrière et 5" en avant

ACCESSOIRES STANDARDS



Accoudoirs



Supports d'épaule




Jambières



Support anesthésie



Crochets de fixation

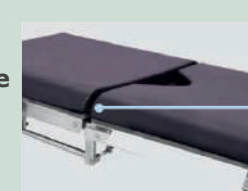

Matelas

LISTE DES ACCESSOIRES STANDARD:

- Matelas autoclavable
- Paire d'accoudoirs
- Arc d'anesthésie
- Paire de supports d'épaules
- Paire de supports périnéaux (latéraux)
- Paire de supports de jambes
- Jeu de crochets de fixation
- Télécommande à fil
- Panneau de commande supplémentaire
- Batterie rechargeable intégrée



EN OPTION

ACCESSOIRES PRINCIPAUX EN OPTION:

- Ceinture de retenue des jambes
- Ceinture de retenue du corps
- Porte-cassette
- Support à perfusion
- ES-KM1206/H Fixation ortho suspendue
- Chariot pour ES-KM1206/H
- Bassin de collecte de liquide avec drain pour GYN
- Support pubis/sacrum/sternum (coussin + support inox)
- Paire de bracelets
- Tableau de commande du bras
- Dispositif de traction Weilberger

FONCTIONS EN OPTION:

- Télécommande sans fil
- Système de commande manuelle
- Hauteur faible (26" de bas jusqu'à 36")
- Hauteur faible (26" de bas jusqu'à 42")
- Verrouillage du sol par télécommande

COMPATIBILITÉ

• ES-KM1206/A - Attachement ortho de Albee

- Ce accessoire peut être utilisé avec tous les tables d'opération
- De plus, une plaque de support pelvienne est supportée au-dessus du cadre et est formée avec une construction asymétrique.
- Des instruments permettent la flexion/le relèvement des jambes et rotules pour secouer/cordage bloquées par le côté pied.
- Deux dispositifs de traction sur point de glisse avec rotule permettant les flexions & rotations du pied avec chaussure de traction à semelle métallique
- Béquilles orthopédiques rembourrées pour genoux/fournissent un soutien aux jambes du patient.



• ES-KM1206/H - Attachement ortho suspendu

- Ce accessoire peut être utilisé avec tous les tables d'opération
- De plus, une plaque de support pelvienne est supportée au-dessus du cadre et est formée avec une construction asymétrique.
- Des instruments permettent la flexion/le relèvement des jambes et rotules pour secouer/cordage bloquées par le côté pied.
- Deux dispositifs de traction sur point de glisse avec rotule permettant les flexions & rotations du pied avec chaussure de traction à semelle métallique
- Béquilles orthopédiques rembourrées pour genoux/fournissent un soutien aux jambes du patient.



• ES-KM1205 - Attachements Neuro

- Stabilité des neurochirurgiens et excellent soutien car ils peuvent être utilisés dans différentes procédures médicales.
- Excellente durabilité grâce à l'acier inoxydable et à d'autres matériaux d'excellente qualité.
- Grâce à l'appui-tête étroit, les accessoires peuvent être utilisés pour des procédures d'ophtalmologie et de neurologie en position couchée sur le ventre (fixateur Sugita à six broches et fer à cheval).

