


Mod. **EOVX-T** (codice : 0200103)¹
della serie "MOBINOX"

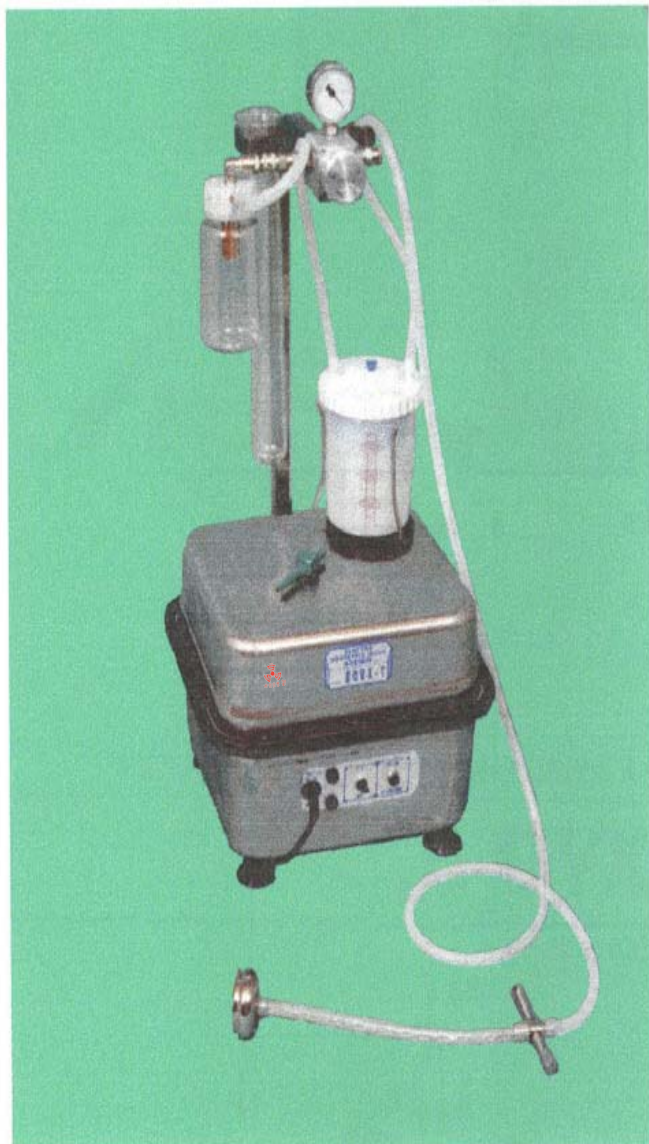

| | |
|-------------------|-----------------------|
| CLASSE | I |
| TIPO | B |
| FUNZIONAMENTO : | CONTINUO |
| VOLT | 220 |
| Hz | 50 |
| WATT assorbiti | 180 |
| FUSIBILI 2 Ampere | 5x20 |
| CONFORMITA NORME | CEI 62/5 93/42/CEE |

Dotazione standard :

- 1 Vaso da 1 l.

- Serie di coppette di Ø 45-50-55-60 mm

Pratica

Funzionale

Pronta per ogni intervento di aspirazione

Robusta

(Non richiede speciale manutenzione)

Caratteristiche Generali :

- **Mobile** in acciaio inox 18/10 a spigoli arrotondati
- **Piedi in gomma** a ventosa
- **Bordo paracolpi** in gomma
- **Sostegno vasi** con piattello in gomma e molle inox
- **Vaso in vetro** con bocca normalizzata, sterilizzabile, coperchio in acciaio inox 18/8 dotato di valvola di troppo pieno
- **Vuotometro** Ø 60 mm , scala : -1/0 bar
- **Camera di espansione** per la protezione del circuito aspirante, con valvola di troppo pieno e innesto rapido per il distacco del gruppo.
- **Provettone** porta sondini in vetro pirex
- **Vuotostato** di regolazione a 4 livelli
- **Gruppo aspirante** a membrana esente da manutenzione; portata 60 l./min. , aspirazione max 0,9 bar
- **Silenziosità** ottimale
- **Ingombro** : cm. 40x36x60 h
- **Peso** : Kg 7



OVX - M

(codice : 0200201)



- **Pompa manuale** in ottone nichelato con valvola di non ritorno.
- **Struttura** in acciaio inox 18/10.
- **Vuotometro** a innesto : Ø 60,
scala : -1/ 0 bar.
- **Vaso di raccolta** 500 cc. con attacco ad innesto rapido e valvola di troppo pieno.
- **Vite micrometrica** per la regolazione del livello di vuoto
- **Tubi** di collegamento in gomma siliconica.

VENTOSA OSTETRICA CON POMPA A PEDALE VACUUM EXTRACTOR



OVX - P

(codice : 0200202)



- **Pompa a pedale** di grande diametro con valvola di non ritorno.
- **Struttura portante** in acciaio inox 18/10.
- **Vuotometro** a innesto : Ø 60,
scala : -1/ 0 bar.
- **Vaso di raccolta** 500 cc. con attacco ad innesto rapido e valvola di troppo pieno.
- **Vite micrometrica** per la regolazione del livello di vuoto
- **Tubi** di collegamento in gomma siliconica.



ESSE 3 Via Garibaldi 30
14002 Castelnuovo D.B.(AT) - I
tel +39 011 99 27 706
fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web : www.4ci.com

