



ES-DLM6C


Centrifugeuse réfrigérée
de grande capacité



LABORATOIRE

ES-DLM6C

Centrifugeuse réfrigérée de grande capacité

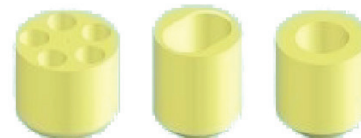

Introduction

ES-DLM6C est un nouveau modèle avec écran tactile couleur haute résolution de 10,2 pouces. Avec un rotor de balançoire 6x1000ml (seau rond) et 6x1000ml (seau ovale) l'ES-DLM6C est l'appareil préféré dans les champs comme bio-pharmacie, produits biologiques et banque de sang.

Fonctionnalités

- Il peut faire tourner des capacités de tubes de 1,5 ml à des sacs de sang triples/quadruples de 400 ml à 500 ml.
- Le réfrigérant utilisé répond aux exigences environnementales. La plage de réglage de température est de -20°C à 40°C . Il peut maintenir la température en dessous de -4°C à une vitesse maximale.
- Fonctions protectrices de verrouillage électronique de la porte, déséquilibre, sur-température et sur-vitesse pour un fonctionnement sécuritaire.
- Faible bruit (moins de 65dB) et vibration.
- Il peut stocker 99 programmes et 100 enregistrements/informations sur les défauts. Grâce au port USB (configuration par option client), les données d'exploitation peuvent être copiées. Les paramètres de configuration et d'exécution peuvent être affichés simultanément à l'écran.

Caractéristiques techniques

| | |
|--|-----------------------|
| Modèle | ES-DLM6C |
| Max Vitesse | 6000rpm |
| Max RCF | 6680xg |
| Capacité maximale | 6x1000ml |
| Précision de vitesse | ±10rpm |
| Plage de réglage du temps | 1min à 99h59min |
| Plage de réglage temporaire | -20°C à 40°C |
| Précision temp | ±1°C |
| Unité d'assemblage du compresseur | Unité non CFC (R404a) |
| Bruit | <65dB(A) |
| Alimentation | AC220V±22V 50Hz 30A |
| Puissance | 3Kw |
| Dimension (W x D x H) | 730x840x1200mm |
| Dimension de paquet (W x D x H) | 920x1040x1520mm |
| Poids net | 260kg (260kg) |



Caractéristiques techniques

Options de rotor

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| No1  Cod. 801900 Vitesse max: 6000rpm Max RCF: 6680xg Capacité rotor: 6x500ml |  Cod. 800705 6x250ml |  Cod. 800708 6x7x15ml falcon |  Cod. 800711 6x50ml falcon | |
| |  Cod. 800706 6x100ml |  Cod. 800710 6x10x5ml |  Cod. 800713 6x7x10ml | |
| |  Cod. 800707 6x50ml | Les adaptateurs peuvent être personnalisés | | |
| No2  Cod. 850500 Vitesse max: 4200rpm Max RCF: 5100xg Capacité rotor: 6x1000ml |  Cod. 850530 6x1000ml |  Cod. 850514 6x500ml |  Cod. 850520 6x14x15ml | |
| | |  Cod. 850515 6x300ml |  Cod. 850522 6x37x7ml | |
| | |  Cod. 850516 6x3x100ml |  Cod. 850525 6x24x5ml | |
| | |  Cod. 850517 6x5x50ml falcon |  Cod. 850526 6x28x1.5ml | |
| | |  Cod. 850518 6x5x50ml |  Cod. 850527 6x200ml blood bags | |
| | |  Cod. 850519 6x14x15ml falcon |  Cod. 850535 6x250ml falcon | |
| | |  Cod. 850610 6x1000ml |  Cod. 850602 6x1000ml | Les adaptateurs peuvent être personnalisés |