




FICHE TECHNIQUE 

Modèle: VR 1000

Regulateur de vide

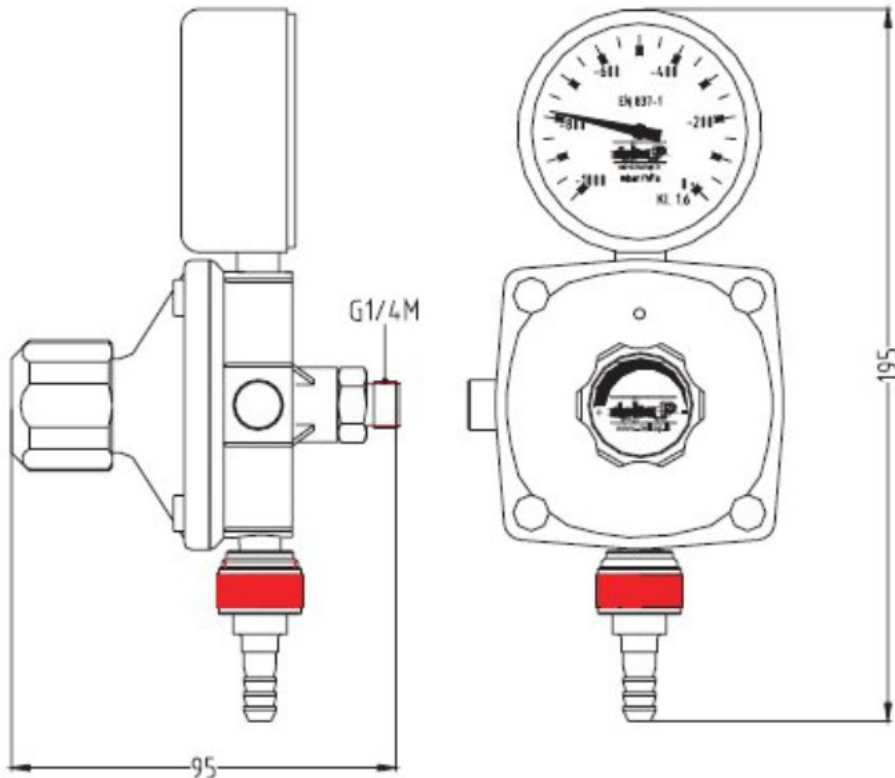

Echelle 0-1000 mbar

Le régulateur de vide est utilisée pour ajuster le niveau de dépression au cours de l'aspiration dans le domaine médical. Ce régulateur doit être connecté à la source de vide par l'aide des unités de terminaux spécifiques disposés. Peut être connecté directement par l'aide d'un greffon spécifique ou accroché aux barres porte instruments et reliée au l'aide d'un kit spécial. Pour utiliser cet appareil, appuyer simplement sur le bouton ON/OFF et ajuster le niveau de vide indiqué par l'aiguille sur le cadran de l'interrupteur à vide, une fois que vous réglez le niveau désiré, il est possible d'agir directement sur le bouton ON/OFF pour éteindre le régulateur ou restaurer rapidement la valeur du vide. Plusieurs accessoires sont utilisés avec le régulateur pour assurer une utilisation appropriée, tels que les vases de sécurité et de collecte, les greffes spécifiques, les kits pour le montage à barre, les lances terminaux pour l'aspiration et le tube de silicone.



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

