



UNITÀ DI SVILUPPO A TEMPERATURA TERMOREGOLATA "SERIE 400"

MODELLO "HOSPITAL 410" Cod. 070710

VASCA DI SVILUPPO DA 20 LITRI E VASCA DI FISSAGGIO DA 40 LITRI IMMERSI NEL BAGNO TERMOREGOLATO

SCOMPARTO DI LAVAGGIO INTERMEDIO It 15 E FINALE It 100

MODELLO "PRATIC 401" COD. 070701

VASCA SVILUPPO DA 10 LITRI IMMERSA NEL BAGNO TERMOREGOLATO

VASCA PER FISSAGGIO DA 10 LITRI

SCOMPARTO UNICO PER LAVAGGIO INTERMEDIO E FINALE It 85



COSTRUZIONE SECONDO NORMATIVE C.E.I. 66-5 CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE: 93/42 CEE 89/336 CEE 73/23 CEE

UNITÀ TRATTAMENTO MANUALE

MANUAL PROCESSING UNIT

Serie "400" con possibilità di regolazione della temperatura mantenuta costante dalla termostatazione del bagno. Completa di bacinelle asportabili con coperchio, per chimici di sviluppo e fissaggio.

Sicurezza termica contro surriscaldamento. Impianto idraulico con elettrovalvole di carico, rubinetti e sistemi di scarico, spruzzatori e livelli di troppo pieno.

I comandi elettrici, di entrambe le vasche sono concentrati nel "quadro elettronico control 400" da installare a muro in zona protetta, comprendono:

- la selezione delle temperature di esercizio
- la inserzione delle elettrovalvole
- le segnalazioni di sicurezza termica
- interruttore generale e fusibili



MODELLO "HOSPITAL 410"

"400" line with adjustable solution temperature. Developer and fixer removable tanks with lids.

Overtemperature thermal cutout. Piping system with solenoid valves, stop valves, spray nozzles, overflow standpipes.

All controls are included in the "Electronic control 400 control board" to be installed on a wall in a safe area, including:


- temperature setting
- solenoid valve control
- thermal cutout warning lights
- mains switch with fuses.



Alimentazione / Power supply: 220 V - 50 Hz

COD.	MODELLO	COSTRUZ.	CAPACITÀ LITRI SVIL - FIX	WATT.	MISURE
	MODEL	CONSTR.	CAPAC. DEV.-FIX		DIMENSIONS
070701	PRATIC 401	P.V.C.	10 ÷ 10	800	cm 63x54x95h kg 30
070710	HOSPITAL 410	P.V.C.	20 ÷ 40	1.600	cm 100x60x95 h kg 55

MODELLO "PRATIC 401"

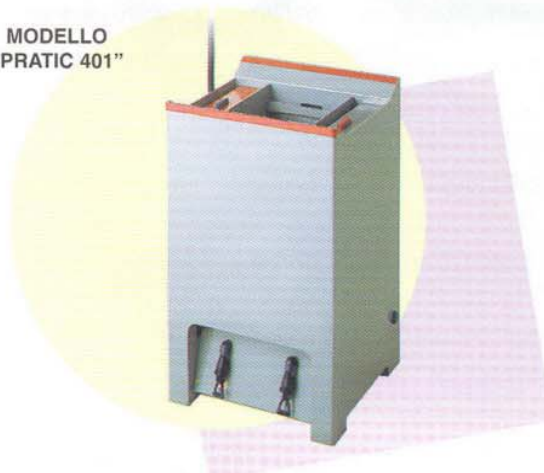

IL FABBRICANTE SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE IN SEDE PRODUTTIVA



CLASSE F

"400 MODEL" X-RAY MANUAL PROCESSING UNIT WITH AUTOMATIC CONTROL OF THE TEMPERATURE

HOSPITAL 410 Code 070710

DEV TANK CAPACITY 20 LITRES
FIX TANK CAPACITY 40 LITRES
WITHIN THE HEATH CONTROLLED WATER BATH.

INTERMEDIATE RINSING It 15 AND FINAL WASHING It 100 COMPARTMENT

PRATIC 401 Code 070701

DEV TANK CAPACITY 10 LITRES
WITHIN THE HEATH CONTROLLED WATER BATH.

FIX TANK CAPACITY 10 LITRES

INTERMEDIATE RINSING AND FINAL WASHING TANK It 85

MANUFACTURED IN COMPLIANCE WITH C.E.I. 66-5 AND EEC STANDARDS

