

ES-723



PLATE BAGS STIRRER



The Plate Bag Stirrer **ES-723** is equipped with a separate cell holder which can contain 18 bags cc. 400. A constant speed of 5 revolutions per minute keeps the cellular material in continuous suspension before the transfusion. The perforated basket allows air circulation so the temperature variations are avoided. The motor position guarantees continuous operation for several hours without overheating. Outer casing in powdered painted steel acids resistant, basket made of stainless steel Aisi 304 2B glazed. Main switch bright.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Work surface dimensions - 9 bins WxDxH:
250x20x150 mm.
Overall dimensions WxDxH: 520x280x360 mm.
Weight: 10 Kg

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 230 V - 50 Hz.
Electrical input: 45 W
Overload fuses: 2 fuses x 0.5 A (5x20) mm.
Connection outlet: 10 A



AGITATEUR PLAQUE POUR POCHE

L'agitateur plaque pour poches **ES-723** est équipé d'un support de cellule séparé qui peut contenir 18 poches de 400 cc. Une vitesse constante de 5 tpm maintient le matériel cellulaire en suspension continue avant la transfusion.

Le panier perforé permet la circulation d'air pour éviter les variations de température.

La position du moteur garantit un fonctionnement continu pendant plusieurs heures sans surchauffe.


Boîtier externe en acier peint époxy résistant aux acides, panier en acier inox AISI 304 2B vitré. Interrupteur principal lumineux.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions surface de travail 9- bacs LxPxH:
250x20x150 mm.
Dimensions externes LxPxH: 520x280x360 mm.
Poids : 10 kg

SPECIFICATIONS ELECTRIQUES

Alimentation : 230 V - 50 Hz.
Puissance électrique : 45W
Fusibles de protection : 2 x 0.5 A (5x20) mm.
Prise de connexion : 10 A

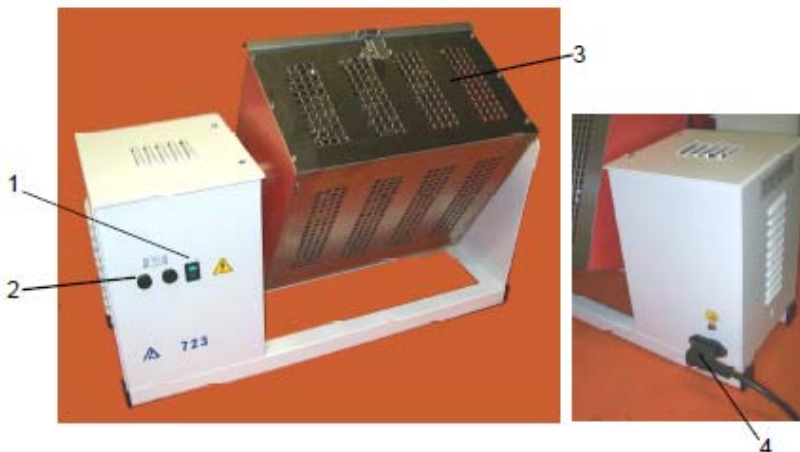

- 1 Main switch bright/*Interrupteur general lumineux*
- 2 Overload fuses/*Fusibles de protection*
- 3 Cell holder basket/*Panier porte-cellule*
- 4 Power cable outlet/*Câble d'alimentation de sortie*



ES-724



- 1 Signal lamp for stirrer in function/Lampe de signalization pour agitateur en fonction
- 2 Speed controller line 5 -10= 60-80 rpm/Régulateur de vitesse ligne 5-10=60-80 rpm
- 3 Main switch bright/Interrupteur general lumineux
- 4 Timer 0-6 hours/Minuterie
- Overload fuses 0.5 A F (5x20 mm.) are on the rear/Les fusibles de protection (0.5 A F 5x20) sont sur l'arrière



Anti-slip rolls

Controls panel



BOTTLES STIRRER

The bottle stirrer **ES-724** is suitable for maintain in rotation 6 bottles Ø 86 H.175 mm. It is equipped with 4 anti-slip rolls. Electronic regulation of rotations: max 80 rpm. Utilization by timer control for a preset period up to 0 – 6 hours. It can contains nr. 1 bottle 5 Lt. - nr. 2 bottles 2 Lt. – nr. 2 bottles 1 Lt - nr. 6 bottles 500 cc. Outer casing in powdered painted steel acids resistant. Main switch bright.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Working surface dimensions n°4 rolls = n°3 lanes length 360 mm.
Overall dimensions WxDxH: 300x480x250 mm with bottles
Max weight working load 6 Kg.
Weight: 20 Kg

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 230 V - 50 Hz.
Electrical input: 40 W
Overload fuses: 2 fuses x 0.5 A F (5x20) mm.
Connection outlet: 10 A



AGITATEUR A BOUTEILLES

L'agitateur à bouteilles **ES-724** est approprié pour maintenir en rotation 6 bouteilles Ø 86 mm H.175. Il est équipé de 4 rouleaux anti-dérapants. Régulation électronique de rotations: max 80 min. Utilisation par commande de la minuterie pour une période prédéterminée jusqu'à 0 - 6 heures. Il peut contenir nr. 1 bouteilles de 5 Lt. - nr. 2 bouteilles 2 Lt. - nr. 2 bouteilles 1 Lt - nr. 6 bouteilles de 500 cc. Boitier externe en acier peint époxy résistant aux acides, panier en acier inox AISI 304 2B vitré. Interrupteur principal lumineux.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions surface de travail n°4 rouleaux = n°3 voies longueur 360 mm.
Dimensions externes LxPxH: 300x480x250 mm avec bouteilles.
Capacité maximale de charge de travail 6 kg.
Poids : 20 kg

SPECIFICATIONS ELECTRIQUES

Alimentation : 230 V – 50 Hz.
Puissance électrique : 40W
Fusibles de protection : 2 x 0.5 A (5x20) mm.
Prise de connexion : 10 A



ESSE 3 Via Garibaldi 30
14022Castelnuovo D.B. (AT)
tel +39 011 99 27 706
fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web : www.esse3-medical.com

