



ESS-250TP Line

Autoclaves à vapeur
avec porte coulissante



STERILISATION



EGG!&) \$HD'@]bY

Autoclaves à vapeur avec porte coulissante




Ligne de stérilisateurs à vapeur automatiques étudiée et développée selon les dernières exigences de stérilisation des États et en se référant aux normes internationales.

Elle peut être largement utilisée pour stériliser pansements médicaux, instruments, vêtements aseptiques, bio-produits dans les domaines de l'hygiène médicale, de l'industrie pharmaceutique, du génie biologique et des tests de laboratoire sur les animaux.




CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- La chambre adopte un nouveau design spécifique avec le centre du fond concave, ce qui rend l'évacuation de l'eau de condensation en douceur, et la mesure de protection de la température efficace réduit la consommation d'énergie et le poids de l'air conditionné.
- L'utilisation de la machine à soudage automatique du plasma de France SAF, la technologie de soudage spécifique et le traitement de vieillissement garantissent une qualité fiable pour le corps principal.
- La structure de porte coulissante horizontale résout au maximum le problème de l'espace de fonctionnement. et le fonctionnement automatique facile, sûr et pratique réduit au maximum le travail de l'opérateur. La porte d'étanchéité a plusieurs protections de sécurité et un dispositif d'ouverture manuelle, qui protègent au maximum l'opérateur en toute sécurité.
- Le traitement de refroidissement efficace pour drainer le système réduit la pollution de l'environnement.

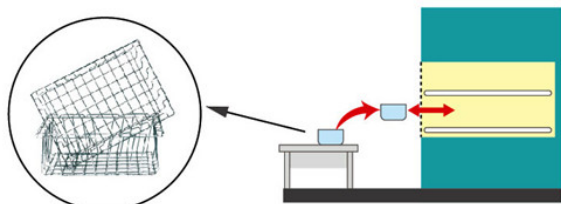

**Méthode de chargement
à étagères de stérilisation
(Volume de la chambre de 160L et 250L)**

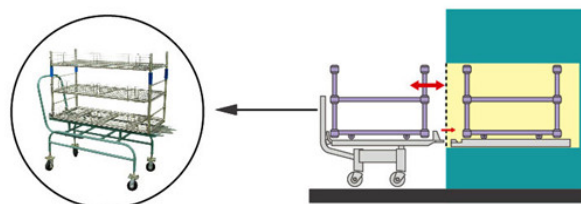

**Méthode de chargement
à chariots de transport et de stérilisation
(Volume de la chambre de 450L, 600L et 800L)**



Écran tactile SIEMENS



Etagères



Panier de stérilisation



**Le système de conduites adopte
tuyaux sanitaires en acier inoxydable
et soupapes pneumatiques
de marques mondiales**



Réceptif de stérilisation



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Caractéristiques communes:

Design de la chambre	Horizontale et rectangulaire	
Design de la porte	Porte single ou double, automatique et coulissante en vertical	
Matériel	Corps principal, Revêtement, Conduites	Acier Inox 304
	Générateur de vapeur intégré	Acier au carbone
Consommation de temps	50-60minutes/Cycle	
Enregistrement des données	Imprimante micro	
Écran	Écran tactile SIEMENS	
Pression de conception	-0.1/0.3 Mpa	
Température de conception	150°C	
Températures Max. de travail	134°C	
Production de vapeur	0.3-0.5 Mpa, générateur de vapeur intégré	
Production de air comprimé 0.5-0.7 Mpa	0.05M ³ /min	
Contrôleur	Système de contrôle SIEMENS	
Programmes	Tissu1(P01), Instruments1(P02), Test BD(P03) , Liquides(P04), Plastique & Gants(P05), Tissu2(P06), Instruments2(P07), Rinçage(P08), Gravité(P09), Défini par l'utilisateur(P10)	
Alimentation	Triphasé 380V 50Hz	
Compre sseur d'air	Inclus	
Adoucisseur d'eau	Inclus	
Accessoires en option	Chariot de transport	

- Caractéristiques spécifiques:

Code avec porte single	ESS-250TP/160	ESS-250TP/250	ESS-250TP/450	ESS-250TP/600	ESS-250TP/800
Code avec double porte	ESS-250TP/160D	ESS-250TP/250D	ESS-250TP/450D	ESS-250TP/600D	ESS-250TP/800D
Volume de la chambre	160L	250L	450L	600L	800L
Dim. chambre (LxIxH)	100x41x41 cm	100x51x51 cm	100x66x70 cm	130x66x70 cm	175x66x70 cm
Dim. Totale (LxIxH)	126x80x 180 cm	126x80x180 cm	137x128x200 cm	170x128x198 cm	215x128x198 cm
Poids Net	600 kg	700 kg	1000 kg	1250 kg	1450 kg
Panier standard ISO (600x400x200)mm	panier de chargement à deux couches	panier de chargement à deux couches	4	6	8
Paquet standard ISO (600x300x300)mm	panier de chargement à deux couches	panier de chargement à deux couches	6	8	8
Prise d'eau 0,15-0,3MPa	300kg/cycle	400kg/cycle	500kg/cycle	600kg/cycle	700kg/cycle
Power AC 380V 50Hz	21,45kW	21,45kW	32,35kW	43kW	57kW
Puissance d'entrée	24kVA	24kVA	36kVA	46,5kVA	61kVA
Méthode de chargement	Étagères de stérilisation	Étagères de stérilisation	Chariots de transport et de stérilisation	Chariots de transport et de stérilisation	Chariots de transport et de stérilisation



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

