



FICHE TECHNIQUE ESSE-903


ESSE-903 est un appareil portable, facile à employer, léger, programmable, avec interprétation automatique de la trace ECG, fonctionnant avec réseau et batterie interne rechargeable.



- acquisition simultanée de tous les 12 dérivations
- Affichage ECG de 1 piste, possibilité d'impression sur papier thermique de 1 et 3 pistes, avec l'analyse des résultats, date, temps, données du patient, etc.
- mode d'enregistrement AUTO/MANUAL/RHYTHM
- écran LCD 192 * 164 pour le monitoring de la dérivation choisi, fonctionnement secteur/batterie, niveau de charge de la batterie, liaison vers une ou plus dérivations interrompues, date, heure, calibration, vitesse du papier, filtres insérés, etc.
- sortie RS 232 pour branchement à un modem fax (télé-cardiologique), Ethernet et USB (optionnel) pour réseau et ordinateur externe
- protection contre les décharges des défibrillateurs
- détection automatique arythmies
- fonction freeze écran in temps réel



- Imprimante à papier thermique (papier rouleau) 63 mm x 20 mt
- Vitesse du papier : 25-50 mm/s

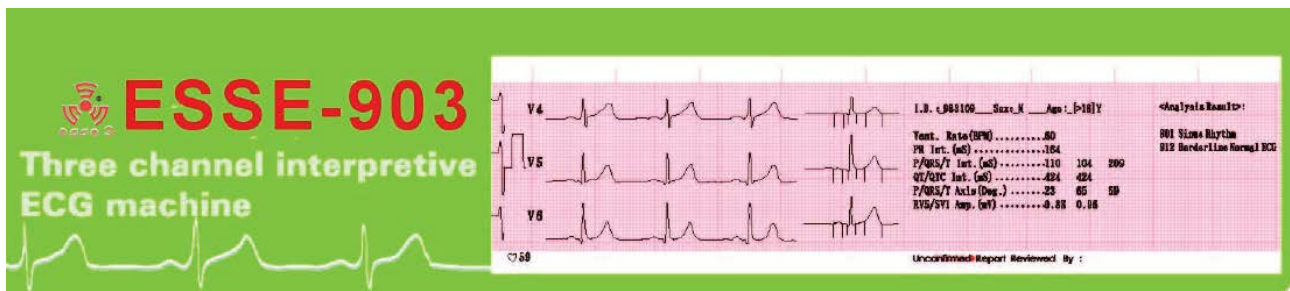

- sensibilité: AUTO -2.5-5-10-20 mm/mV
- Filtres: EMG 25 , 35 , 45 Hz, antidrift
LOWPASS 150/100/75 Hz
- Conversion A/D: 18 bits (1000 Hz)
- CMRR: >100 dB
- Constante de temps > 3,2 sec
- Gamme de fréquence: 0.05 : 150 Hz
- Display: LCD couleur 320x240
- Prise sortie < 100 ohms , sensibilité 1V/mV
- Prise entrée > 100Kohms , sensibilité 10 mmV/V
- Impédance d'entrée > 50 Mohms (10 Hz)
- Dimensions 300x230x61 mm , Poids 2 kg
- Alimentation 110-220V 50/60Hz
- batterie interne rechargeable Li-Ion 14,4V (autonomie 200 analyses pour version standard
- Normes : classe I , CF, IEC 601/1



ESSE 3 Via Garibaldi 30
14022Castelnuovo D.B. (AT)
tel +39 011 99 27 706
fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web : www.esse3-medical.com

