

EST-800E Fiche technique

EST-800E TABLE OPERATION ELECTRIQUE MULTIFONCTION Kidney surgery position

Caractéristiques

Radiolucent Table Top

1. L'EST-800E est une table d'opération multifonction complètement électrique
2. Réglage électro-hydraulique de l'hauteur, du proclive/déclive, de l'inclinaison latérale, du dossier
3. Le design spécial du plan de la table permet son emploi en mode « normal » et « réserve », pour faciliter les opérations avec un ampli de brillance arc à C sans aucune zone d'ombre
4. L'EST-800E est particulièrement indiqué pour tous les emplois en angiographie, dans le cathétérisme, dans la chirurgie spinale
5. Avec le chariot d'extension EST-160 la table devient l'instrument idéal pour la chirurgie orthopédique
6. La table EST-800E est indiquée aussi pour la chirurgie ophtalmologique et la chirurgie plastique, ayant un grand espace libre au dessous de la table
7. La table est disponible à 4 sections (avec plateau jambes uni) et à 5 sections (avec plateau jambes divisé et escamotable)



With AT-160 Orthopedic Tractor



(Option)

VERSIONS DISPONIBLES

TYPE "S": Avec translation du plan de travail pour emploi avec ampli de brillance

TYPE "T": Avec dispositif d'extension pour chirurgie orthopédique et la fluoroscopie

TYPE "R": Avec fonction AUTO-REVERSE à travers un facile commande "one touch" et fonction "AUTO-BRAKE" (La table ne répond pas aux commandes si le frein n'est pas inséré)

TYPE "B": Avec batterie interne rechargeable et dispositif " AUTO RECHARGE " (autonomie 8H)

COMPOSITIONS

"EB" avec batterie interne rechargeable

"ER" avec fonction AUTO-REVERSE

"ET" avec chariot extension

"ERB" avec fonction AUTO-REVERSE et batterie interne rechargeable

"ETB" avec chariot d'extension orthopédique et batterie interne rechargeable

"ERS" avec translation plan de la table et fonction AUTO REVERSE

"ERSB" avec translation plan de la table + fonction AUTO REVERSE et batterie interne rechargeable

"ERST" avec translation plan de la table + fonction AUTO REVERSE et chariot d'extension orthopédique

"ERSTB" avec translation plan de la table + fonction AUTO REVERSE + chariot d'extension orthopédique et batterie interne rechargeable

Caractéristiques

- DIMENSIONS PLAN DE TRAVAIL 50 X 197 CM
- ELEVATION PLAN DE TRAVAIL 69 – 100 CM
- REGLAGE DOSSIER +65 °/ -30°
- INCLINAISON LATÉRALE DROITE/GAUCHE \pm 25°
- PROCLIVE/DECLIVE \pm 25°
- TETIERE \pm 90°
- SECTION JAMBES , BAS/HAUT +15° / -100°
(en option section jambes divisés avec ECARTEMENT 90°)
- ALIMENTATION 110V/230VAC

ACCESSOIRES STANDARD:


- ARC ANESTHÉSIE \times 1 SET
- TELECOMMANDE
- TETIERE \times 1 PC
- SUPPORT JAMBES \times 1 PC



Head & Leg section exchangeable function for full body fluoroscopy



Head & Leg section exchangeable function for full body fluoroscopy

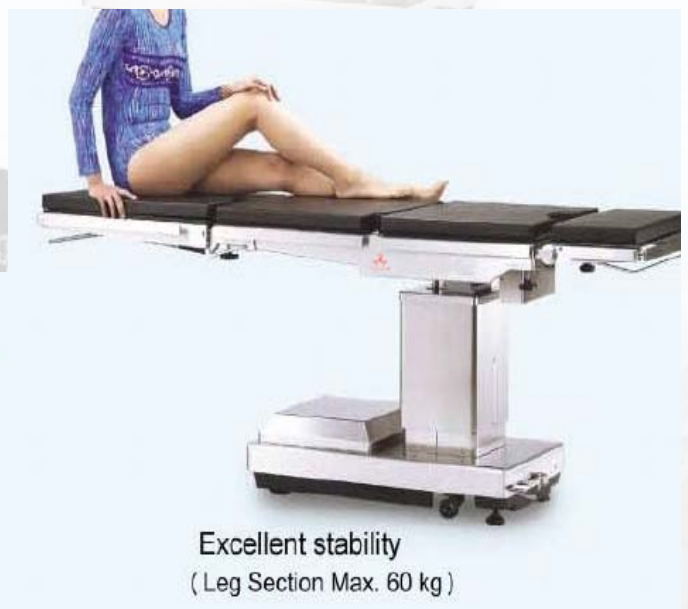

Excellent stability
(Leg Section Max. 60 kg)



ESSE 3 Via Garibaldi 30
14022Castelnuovo D.B. (AT)
tel +39 011 99 27 706
fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web : www.esse3-medical.com

