




# SPI 500

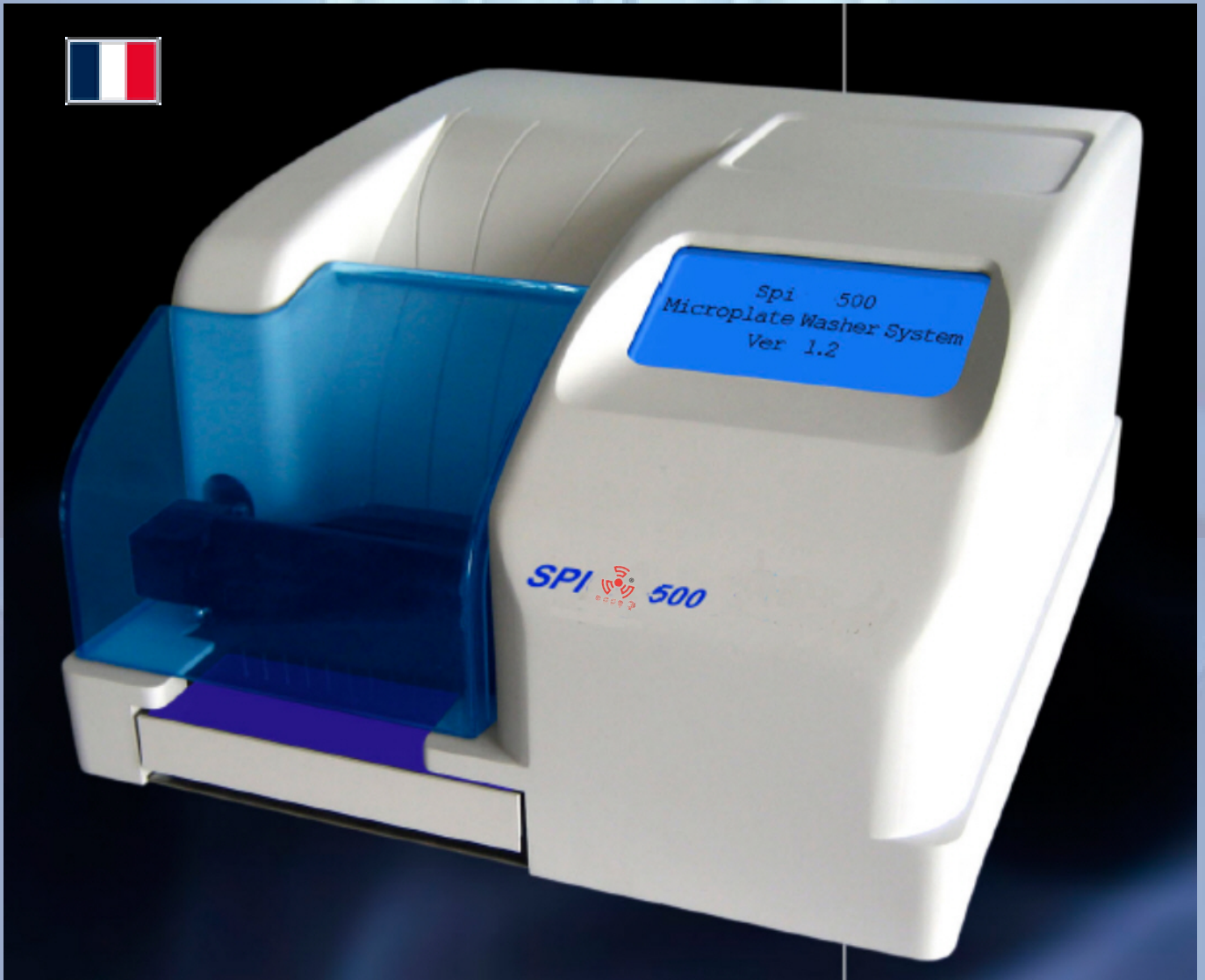

**LAVEUR DE MICROPLAQUES**

# LAVEUR DE MICROPLAQUES

## Caractéristiques principales :

- Écran LCD tactile, opération facile
- L'aiguille d'aspiration et de distribution sont séparés
- Trois canaux: canal de détergent, canal de rinçage et canal de déchets
- 3 types de plaques différentes peuvent être lavées (y compris plaque fond plat, fond en U et fond en V)
- Distribution, aspiration et absorption peuvent être programmés par l'utilisateur
- Possibilité de choisir plusieurs méthodes de lavage (mode normal, mode à 2 points et mode de nettoyage en bas)
- La fonction de plaque secouant et l'intensité peuvent être ajustées
- Calibration automatique du distributeur et réglage précis
- Surveillance de la pression automatique et de vide, cycle de lavage automatique
- Alerte liquide
- Arrêt d'urgence disponible peut être poursuivi.
- Grande capacité de mémoire pour stocker jusqu'à 99 protocoles de lavage programmés par l'utilisateur

## Caractéristiques techniques

Résolution: 1 pi par étape

Précision de distribution: CV <2%

Volume de distribution: 50-9999 ul

Temps d'aspiration: 0,1 - 99 sec.

Temps de trempage: 0-99 heures

Mode: mode de plaque et bande

Répétition: 0-99 fois

Volume résiduel: mode normal <2ul: mode de nettoyage <1 microlitre

Capacité de stockage de données 99 programmes

Distributeur: 12 canaux ou 8 canaux

Affichage: 240 x 128 LCD

Alimentation: 110/220 V  $\pm$  10%, 50/60Hz



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30  
14022 Castelnuovo D.B. (AT)

Tel +39 011 99 27 706

Fax +39 011 99 27 506

e-mail [esse3@chierinet.it](mailto:esse3@chierinet.it)

web: [www.esse3-medical.com](http://www.esse3-medical.com)

